

## NUTZUNGSHINWEIS



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Lili-Lampe verwenden. Bewahren Sie sie auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

## SCHRITT 1: LADEN SIE DIE LAMPE AUF

Laden Sie die Lampe vor dem Gebrauch 8 Stunden lang mit einem 5V/2A USB-C-Ladegerät auf.

Eine rote LED leuchtet auf und wird grün, wenn die Lampe aufgeladen ist.



Wenn die Batterieladung nicht mehr ausreicht, beginnt die Lampe zu blinken.

In der MINI-Position beträgt die Autonomie etwa 7 Stunden.



MAX

DURCHSCHNITT

MINI

## SCHRITT 2: INSTALLATION DER APP

Um die Lampeneinstellungen zu personalisieren, installieren Sie die App Lili for Life, die kostenlos bei Google Play und im App Store erhältlich ist.

Scannen Sie den QR-Code, um die App zu installieren




Scannen Sie mich  
zur Installation



## SCHRITT 3: BLUETOOTH- VERBINDUNG UND SYNCHRONISIERUNG

Uobald die Lampe aufgeladen ist:

- Aktivieren Sie Bluetooth und Geolokalisierung des Smartphones, auf das die App heruntergeladen wurde
- Öffnen Sie die App „LILI“.
- Schalten Sie die Lili-Lampe ein
- Klicken Sie dann auf „SUCHEN“
- Wenn „Lili Lamp“ erscheint: Klicken Sie darauf

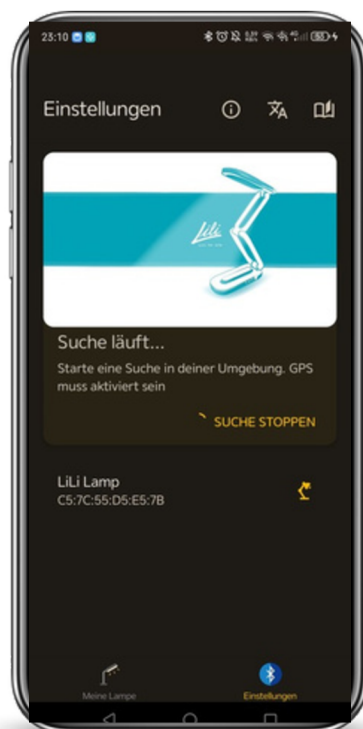

Sie haben Ihre Lampe nun mit Ihrem Smartphone gekoppelt.

## SCHRITT 4: EINSTELLUNGEN DER LAMPE (PAARWEISE DURCHZUFÜHREN)

Sobald die Lampe eingeschaltet und mit der App gekoppelt ist, können Sie sich mit einem gedruckten Dokument hinsetzen. Nehmen Sie die Anpassungen in Begleitung einer Vertrauensperson vor.

1. Wählen Sie einen Ort mit normaler Beleuchtung (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden).

2. Passen Sie die Lichtintensität an der Seite der Lampe an: Je nach Ihrem Lesekomfort stehen 3 Positionen zur Verfügung:



3. Lesen und kommunizieren Sie Ihre Eindrücke, während die andere Person die folgenden Einstellungen in der App anpasst:

- Geschwindigkeit (Hertz): Die Frequenz der Lichtblitze.
- Balance (%): Die Extinktion der LEDs in % der Leuchtdauer.
- Dauerlicht: Unterbricht vorübergehend die Geschwindigkeits- und Balanceeinstellungen: Das Licht wird dauerhaft.

Beginnen mit:

## Geschwindigkeit

- 1 Tippen Sie auf „Bearbeiten“
- 2 Stellen Sie den Schieberegler auf 60 Hz und passen Sie ihn dann an, bis das Lesegerät keine Lichtblitze mehr wahrnimmt.
- 3 Erhöhen Sie ab dieser neuen Frequenz den Schieberegler schrittweise, um den Lesekomfort zu erreichen. Sobald die Frequenz gefunden wurde, klicken Sie auf Geschwindigkeit, um Ihre Auswahl zu speichern



Dann konfigurieren Sie:

## Die Balance

- 1 Tippen Sie auf „Bearbeiten“.
- 2 Stellen Sie den Schieberegler auf 15 % und passen Sie ihn dann an, bis der Leser den Lesekomfort erkennt.
- 3 Stellen Sie den Saldo standardmäßig auf 17 % ein. Sobald Sie die Frequenz gefunden haben, klicken Sie auf „Balance“, um Ihre Auswahl zu speichern



## Aktivieren Sie, ohne den Leser zu warnen:

### Dauerbeleuchtung

- 1 Fragen Sie ihn nach seinen Eindrücke bezüglich der vorherigen Einstellungen
- 2 Machen Sie dasselbe, nachdem Sie den kontinuierlichen Modus ausgeschaltet haben.
- 3 Wenn der Leser einen Nutzen bei der Rückkehr zum gepulsten Licht erkennt, ist Lili für ihn wirksam.

Gut gemacht ! Lili hat Ihre Einstellungen gespeichert: Sie benötigen Ihr Smartphone nicht mehr, um Lili zu nutzen.

(PS: Vergessen Sie nicht, Ihre Geschwindigkeits- und Balanceeinstellungen zu notieren, wenn eine andere Person Ihr Licht benutzt.)

Rund 50 % der Anwender verspüren eine sofortige Wirkung. Die anderen 30 % benötigen mehrere Anwendungen, um Verbesserungen zu sehen. (Siehe Lili: „Welche Vorteile“)

Wenn Sie die Einstellungen anpassen möchten, verbinden Sie Lili erneut mit der App. Bei Fragen zur Konfiguration wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:



+33 (0)2 78 92 00 10



serviceclient@liliforlife.com

# Lili: Was sind die Vorteile?

## OHNE LILI

Ohne Lili ist das Lesen aufgrund eines Spiegeleffekts, einer Verdoppelung des wahrgenommenen Bildes und einer Überlagerung von Wörtern schwierig. „Die Buchstaben tanzen, die Linien verschmelzen.“

Die Lili-Lampe strahlt gepulstes Licht aus. Durch die Anpassung der Geschwindigkeit der Lichtblitze und der Balance erhalten Sie neuen Lesekomfort.

## MIT LILI 😊

- Kontrastreichere Wahrnehmung von Buchstaben
- Flüssigeres und schnelleres Lesen
- Besseres Verständnis und Konzentration
- Selbstvertrauen, neue Motivation
- Weniger lesebedingte Ermüdung
- Schreiben leichter gemacht

# VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

erwenden Sie mit der Lampe nur ein USB-C-Ladegerät.

Schützen Sie die Lampe vor jeglicher Feuchtigkeitsquelle und vor Kontakt mit Wasser. Benutzen Sie die Lampe und ihr Ladegerät nur im Innenbereich.

Die Lampe muss vor Stößen geschützt werden und darf keiner Temperatur unter 10 °C oder über 40 °C ausgesetzt werden.

Um eine Beschädigung der Lili-Lampe zu vermeiden, muss diese unbedingt in der Schutzhülle transportiert werden.

Kontraindiziert für Personen, die unter epileptischen Anfällen leiden oder leiden könnten (im Zweifelsfall konsultieren Sie Ihren Arzt).

Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst zu öffnen oder die Batterie zu wechseln.

Haben Sie ein Problem? Fragen? Kontaktieren Sie den Lili-Kundendienst



[serviceclient@liliforlife.com](mailto:serviceclient@liliforlife.com)

## Wie verwende ich Lili mit Bildschirmen?

Die Lili-Lampe erleichtert Legasthenikern das Lesen auf jeder Art von Bildschirm: Peripheriebildschirm, Laptop, Tablet, Smartphone, E-Reader usw.

Es wird empfohlen, die Bildschirmhelligkeit vor der Positionierung der Lampe zu verringern, um deren Wirksamkeit zu verbessern. Sie können die Einstellung mithilfe einer der drei Lampenintensitätspositionen feinabstimmen, um den besten Lesekomfort zu finden.

Passen Sie die Höhe und Neigung der Drehungen sowie den Öffnungswinkel gemäß den folgenden Diagrammen an.

Position 1



Position 2



# RECHTLICHE KONFORMITÄTSGARANTIE


Im Rahmen einer Klage bezüglich der gesetzlichen Konformitätsgarantie muss der Kunde:

- Dem Verkäufer steht eine Frist von zwei (2) Jahren ab Lieferung der Ware zu, um gegenüber seinem Verkäufer/Kunde? tätig zu werden
- Kann zwischen Reparatur oder Ersatz des Artikels wählen, vorbehaltlich der Kostenbedingungen gemäß Artikel L. 217-9 des Verbraucherschutzgesetzes;
- Ist während der vierundzwanzig (24) Monate nach der Lieferung der Waren von der Pflicht zum Nachweis der Vertragswidrigkeit der Waren befreit, mit Ausnahme von gebrauchten oder „überholten“ Waren, bei denen diese Frist auf sechs (6) Monate.

Die gesetzliche Konformitätsgarantie gilt unabhängig von einer eventuell gewährten kommerziellen Garantie. Die Umsetzung der Garantie erfolgt kostenfrei.

Sie können sich dafür entscheiden, die Garantie gegen versteckte Mängel an der verkauften Sache im Sinne von Artikel 1641 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall können Sie zwischen der Stornierung des Verkaufs oder einer Preisminderung gemäß Artikel 1644 (?) des Bürgerlichen Gesetzbuches wählen. Klagen wegen versteckter Mängel müssen innerhalb von zwei (2) Jahren ab Entdeckung des Mangels erhoben werden.

Um von der Garantie zu profitieren, müssen Sie Lili for Life per E-Mail benachrichtigen, sobald Sie die auf das Produkt zurückzuführenden Mängel feststellen. Jede Produktrückgabe bedarf der vorherigen Zustimmung von Lili pe

 [serviceclient@liliforlife.com](mailto:serviceclient@liliforlife.com)



Dieses Gerät muss getrennt von anderem Abfall entsorgt werden. Recyceln Sie die Lampe gemäß den geltenden Vorschriften für elektronische und elektrische Komponenten.