

NOTICE D'UTILISATION



Avant toute utilisation de la lampe Lili, veuillez lire attentivement cette notice. Conservez-la afin de vous y référer en cas de besoin.

ÉTAPE 1 : CHARGER LA LAMPE

Avant toute utilisation, mettez la lampe en charge pendant 8 heures à l'aide d'un chargeur **USB C 5V/2A**.

Une led rouge s'allume et devient verte quand la lampe est chargée.



Lorsque la charge de la batterie devient insuffisante, la lampe se met à clignoter.

En position **MINI**, l'autonomie est d'environ 7 heures.



MAX

MOYENNE

MINI

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE L'APPLICATION

Pour personnaliser les réglages de la lampe, installez l'application **Lili for Life**, disponible gratuitement sous Google Play et App Store.


Scannez le QR code pour installer l'application:



ÉTAPE 3 : CONNEXION BLUETOOTH & SYNCHRONISATION

Une fois la lampe chargée :

1. Activez le Bluetooth et la géolocalisation du smartphone sur lequel l'application a été téléchargée
2. Ouvrez l'application "LILI"
3. Allumez la lampe Lili
4. Puis cliquez sur "RECHERCHER"
5. Lorsque "Lili Lamp" apparaît: cliquez dessus

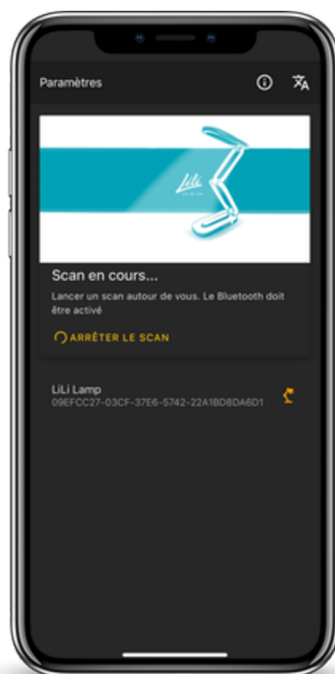

Vous avez maintenant appairé votre lampe à votre smartphone.

ÉTAPE 4 : RÉGLAGES DE LA LAMPE (À FAIRE À DEUX)

Une fois la lampe allumée et appairée à l'application, installez-vous avec un document imprimé. Faites les réglages accompagné d'une **personne de confiance**.

1. Privilégiez un lieu avec un **éclairage normal** (évitez l'éclairage direct du soleil).

2. Réglez l'intensité lumineuse sur le côté de la lampe: **3 positions** sont disponibles en fonction de votre confort de lecture :



3. Lisez et communiquez vos ressentis pendant que l'autre personne ajuste les paramètres suivants sur l'application :

- **Vitesse (Hertz)** : La fréquence des flash lumineux.
- **Balance (%)** : L'extinction des led en % du temps d'éclairage.
- **Eclairage continu** : Interrompt momentanément les réglages de vitesse et de balance : la lumière devient continue.

Commencez par :

La Vitesse


- 1 Appuyez sur "Modifier"
- 2 Placez le curseur à 60Hz puis ajustez jusqu'à ce que le lecteur ne perçoive plus les flashes lumineux.
- 3 A partir de cette nouvelle fréquence, **augmentez progressivement** le curseur pour atteindre un confort de lecture. Une fois la fréquence trouvée, cliquez sur vitesse pour enregistrer votre choix



Puis paramétrez :

La Balance

- 1 Appuyez sur "Modifier".
- 2 Placez le curseur à 15% puis ajustez jusqu'à ce que le lecteur identifie un confort de lecture.
- 3 Par défaut, paramétrez la balance à 17%. Une fois la fréquence trouvée, cliquez sur balance pour enregistrer votre choix

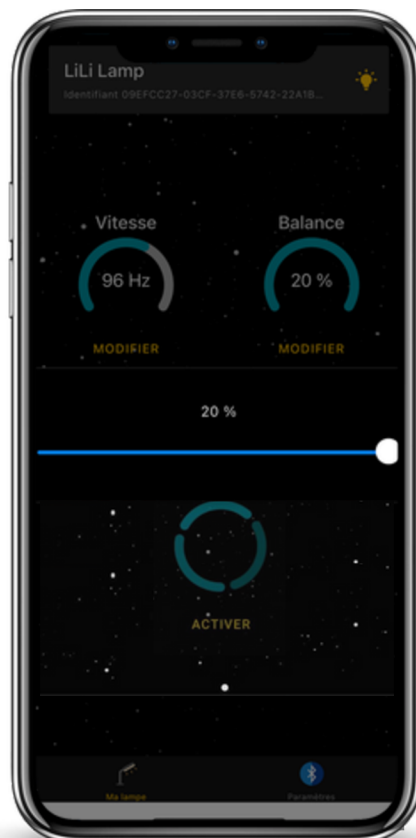

Sans prévenir le lecteur activez :

L'éclairage continu

- 1 Questionnez-le sur son ressenti comme pour les réglages précédents
- 2 Faites de même après avoir désactivé le mode continu.
- 3 Si le lecteur identifie un bénéfice lors du retour à la lumière pulsée, **Lili est efficace pour lui.**

Bravo ! Lili a enregistré vos paramètres: vous n'avez plus besoin de votre smartphone pour utiliser Lili.

(PS: n'oubliez pas de noter vos paramètres de vitesse et de balance si une autre personne utilise votre lampe.)

Environ 50% des utilisateurs ressentent un effet immédiat. Les autres 30% ont besoin de plusieurs utilisations pour percevoir des améliorations. (Voir Lili: "Quels bénéfices")

Si vous souhaitez ajuster les réglages, reconnectez Lili à l'application. Et pour toute question de paramétrage, contactez le service client:



+33 (0)2 78 92 00 10



serviceclient@liliforlife.com

Lili : quels bénéfices ?

SANS LILI

Sans Lili, la lecture est difficile du fait d'un effet miroir, un dédoublement de l'image perçue et une superposition des mots. "Les lettres dansent, les lignes se confondent."

La lampe Lili émet une lumière pulsée. En réglant la vitesse des flashes lumineux et la balance vous accéderez à un nouveau confort de lecture.

AVEC LILI 😊

- Perception des lettres plus contrastée
- Lecture plus fluide et rapide
- Meilleure compréhension et concentration
- Confiance en soi, motivation retrouvée
- Diminution de la fatigue liée à la lecture
- Ecriture facilitée



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez uniquement un chargeur USB C avec la lampe.
Protégez la lampe de toute source d'humidité et de tout contact avec l'eau.
Utilisez la lampe et son chargeur uniquement à l'intérieur.

La lampe doit être protégée des chocs et ne pas être exposée à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
Pour éviter d'endommager la lampe Lili, il est impératif de la transporter dans son étui de protection.

Contre-indiqué pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie (en cas de doute, consultez votre médecin).
N'essayez pas d'ouvrir la lampe ou de changer vous-même la batterie

Un problème ? Des questions ? Prenez contact avec le service client Lili:



serviceclient@liliforlife.com

Comment utiliser Lili avec des écrans ?

La lampe Lili facilite la lecture des personnes dyslexiques sur tout type d'écran : écran périphérique, ordinateur portable, tablette, smartphone, liseuse ...

Il est recommandé de baisser la luminosité de l'écran avant de positionner la lampe pour améliorer son efficacité. Vous pouvez affiner le réglage à l'aide de l'une des 3 positions d'intensité de la lampe pour trouver le meilleur confort de lecture.

Régalez la hauteur et l'inclinaison au niveau des rotations, et l'angle d'ouverture selon les schémas ci dessous.

Position 1



Position 2



GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Lors d'une action en matière de garantie légale de conformité, le client :

- Bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son Vendeur
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévus par l'article L. 217- 9 du Code de la consommation ;
- Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion ou « reconditionnés », où ce délai est fixé à six (6) mois.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. La mise en œuvre de la garantie a lieu sans frais.

Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil et, dans cette hypothèse, vous pouvez choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à l'article 1644 du Code civil. L'action résultant des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez aviser Lili for Life par mail, dès la constatation des défauts imputés au produit. Tout retour produit doit faire l'objet d'un accord préalable de Lili par mail :



serviceclient@liliforlife.com



Cet appareil doit être éliminé séparément des autres déchets. Recyclez la lampe selon la réglementation des composants électroniques et électriques en vigueur.