

AVVISO D'UTILIZZO




Prima di utilizzare la lampada Lili, leggere attentamente queste istruzioni. Conservatelo in modo da poterlo consultare in caso di necessità.

FASE 1: CARICARE LA LAMPADA

Prima dell'uso, caricare la lampada per 8 ore utilizzando un caricabatterie USB C da 5 V/2 A.

Un LED rosso si accende e diventa verde quando la lampada è carica.

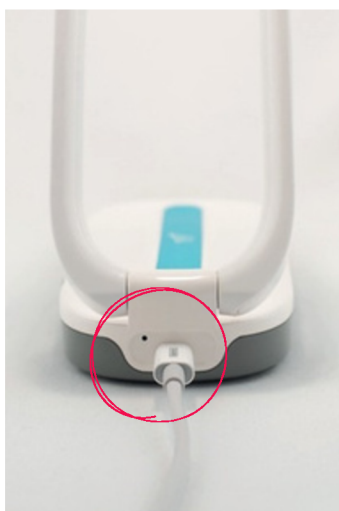

Quando la carica della batteria diventa insufficiente, la lampada inizia a lampeggiare.

In posizione MINI l'autonomia è di circa 7 ore.



MASSIMO

MEDIA

MINI

PASSO 2: INSTALLAZIONE DELL'APP

Per personalizzare le impostazioni della lampada, installa l'applicazione Lili for Life, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

Scansiona il codice QR per installare l'applicazione:




Scansionami per
installarlo



FASE 3: CONNESSIONE E SINCRONIZZAZIONE BLUETOOTH

Una volta caricata la lampada:

- Attiva il Bluetooth e la geolocalizzazione dello smartphone su cui è stata scaricata l'applicazione
- Apri l'applicazione “LILI”.
- Accendi la lampada Lili
- Poi clicca su “CERCA”
- Quando appare "Lili Lamp": cliccaci sopra

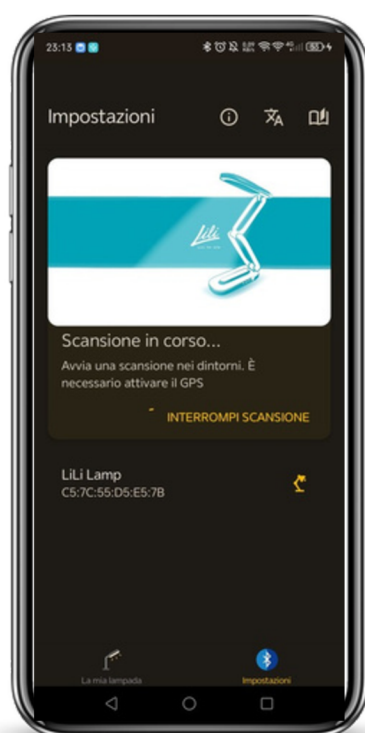

Ora hai abbinato la tua lampada al tuo smartphone.

STEP 4: REGOLAZIONI DELLA LAMPADA (DA EFFETTUARE IN COPPIA)

Una volta accesa la lampada e associata all'app, siediti con un documento stampato. Effettuare le modifiche accompagnati da una persona di fiducia.

1. Scegli un luogo con illuminazione normale (evita la luce solare diretta).
2. Regola l'intensità della luce sul lato della lampada: sono disponibili 3 posizioni a seconda del tuo comfort di lettura:



3. Leggi e comunica i tuoi sentimenti mentre l'altra persona regola le seguenti impostazioni sull'app:
 - Velocità (Hertz): la frequenza della luce lampeggia.
 - Balance (%): Lo spegnimento dei LED in % del tempo di illuminazione.
 - Illuminazione continua: Interrompe temporaneamente le impostazioni di velocità e bilanciamento: la luce diventa continua.

Iniziare con:

Velocità

- 1 Tocca "Modifica"
- 2 Posizionare lo slider a 60Hzt quindi regolare finché il lettore non percepisce più lampeggi luminosi.
- 3 A partire da questa nuova frequenza, aumentare gradualmente il cursore per ottenere il comfort di lettura. Una volta trovata la frequenza, fai clic su velocità per salvare la tua scelta



Quindi configurare:

L'equilibrio

- 1 Tocca "Modifica".
- 2 Posizionare il cursore al 15% quindi regolare finché il lettore non identifica il comfort di lettura.
- 3 Per impostazione predefinita, imposta il saldo al 17%. Una volta trovata la frequenza, clicca su saldo per salvare la tua scelta



Senza avvisare il lettore, attivare:

Illuminazione continua

- 1** Chiedigli quali sono i suoi sentimenti rispetto alle impostazioni precedenti
- 2** Fai lo stesso dopo aver disattivato la modalità continua.
- 3** Se il lettore individua un vantaggio nel ritorno alla luce pulsata, Lili è efficace per lui.

Ben fatto ! Lili ha salvato le tue impostazioni: non hai più bisogno dello smartphone per usare Lili.

(PS: non dimenticare di annotare le impostazioni di velocità e bilanciamento se un'altra persona utilizza la tua luce.)

Circa il 50% degli utenti avverte un effetto immediato. Il restante 30% necessita di molteplici utilizzi per vedere miglioramenti. (Vedi Lili: “Quali vantaggi”)

Se desideri modificare le impostazioni, ricollega Lili all'app. E per qualsiasi domanda sulla configurazione, contatta il servizio clienti:



+33 (0)2 78 92 00 10



serviceclient@liliforlife.com

Lili: quali sono i vantaggi?

SENZA LILI

Senza Lili la lettura risulta difficile a causa di un effetto specchio, di una duplicazione dell'immagine percepita e di una sovrapposizione di parole. “Le lettere danzano, le linee si fondono.”

La lampada Lili emette luce pulsata. Regolando la velocità dei flash luminosi e il bilanciamento accederai a un nuovo comfort di lettura.

CON LILI 😊

- Percezione più contrastata delle lettere
- Lettura più fluida e veloce
- Migliore comprensione e concentrazione
- Fiducia in se stessi, rinnovata motivazione
- Riduzione dell'affaticamento legato alla lettura
- Scrivere diventa più facile



PRECAUZIONI PER L'USO

Utilizzare solo un caricabatterie USB C con la lampada.

Proteggere la lampada da qualsiasi fonte di umidità e da qualsiasi contatto con l'acqua. Utilizzare la lampada e il relativo caricatore solo in ambienti chiusi.

La lampada deve essere protetta dagli urti e non essere esposta a una temperatura inferiore a 10°C o superiore a 40°C.

Per evitare di danneggiare la lampada Lili è indispensabile trasportarla nella sua custodia protettiva.

Controindicato per le persone che soffrono o potrebbero soffrire di attacchi epilettici (in caso di dubbi consultare il medico).

Non tentare di aprire la lampada o di cambiare la batteria da soli

Un problema ? Domande ? Contatta il servizio clienti Lili:



serviceclient@liliforlife.com

Come usare Lili con gli schermi?

La lampada Lili facilita la lettura delle persone dislessiche su qualsiasi tipo di schermo: schermo periferico, laptop, tablet, smartphone, e-reader, ecc.

Si consiglia di abbassare la luminosità dello schermo prima di posizionare la lampada per migliorarne l'efficacia. Puoi ottimizzare l'impostazione utilizzando una delle 3 posizioni di intensità della lampada per trovare il miglior comfort di lettura.

Regolare l'altezza e l'inclinazione delle rotazioni e l'angolo di apertura secondo gli schemi sottostanti.

Position 1



Position 2



GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Nel corso di un'azione relativa alla garanzia legale di conformità, il cliente:

- Beneficia di un periodo di due (2) anni dalla consegna della merce per agire nei confronti del Venditore
- Può scegliere tra la riparazione o la sostituzione dell'articolo, alle condizioni di costo previste dall'articolo L. 217-9 del Codice del Consumo;
- È esente dal fornire la prova dell'esistenza del difetto di conformità del bene durante i ventiquattro (24) mesi successivi alla consegna del bene, ad eccezione dei beni usati o “ricondizionati”, dove tale periodo è fissato a sei (6) mesi.

La garanzia legale di conformità si applica indipendentemente da qualsiasi garanzia commerciale concessa. L'attuazione della garanzia avviene a titolo gratuito.

Puoi decidere di attivare la garanzia contro i vizi occulti della cosa venduta ai sensi dell'articolo 1641 del Codice Civile e, in questo caso, puoi scegliere tra l'annullamento della vendita o la riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 1644 del codice civile. L'azione derivante da difetti nascosti deve essere intentata entro due (2) anni dalla scoperta del difetto.

Per beneficiare della garanzia, è necessario avvisare Lili for Life via e-mail non appena si notano i difetti attribuiti al prodotto. Qualsiasi reso di prodotto deve essere soggetto al previo accordo di Lili tramite e-mail:



serviceclient@liliforlife.com



Questo dispositivo deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. Riciclare la lampada secondo le normative vigenti sui componenti elettronici ed elettrici.